


Instrukcja podania



Ref









ChPL

Instrukcja podania

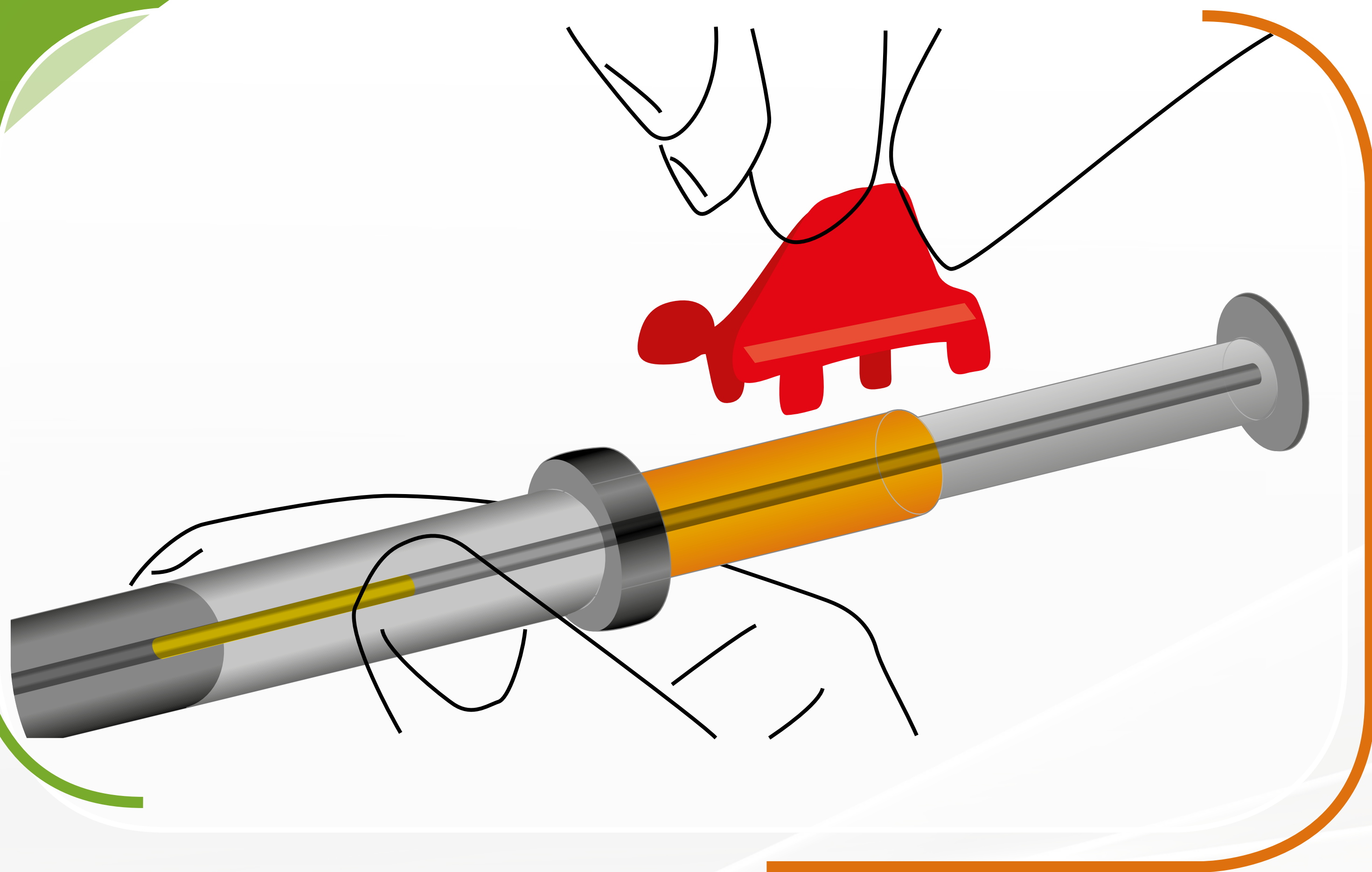

#1


- Wyjąć aplikator ze sterylnego opakowania.
- Sprawdzić, czy implant znajduje się we właściwym miejscu w aplikatorze.
- Usunąć pierścień zabezpieczający.

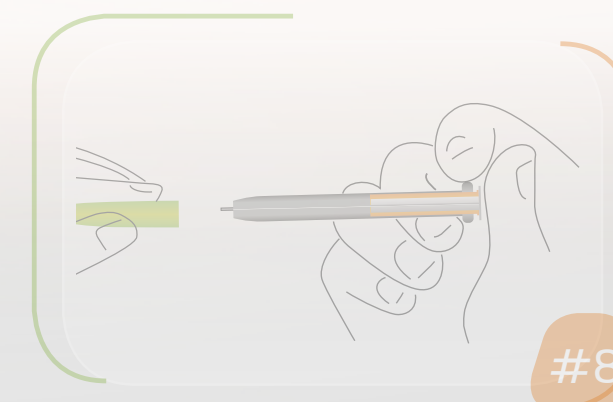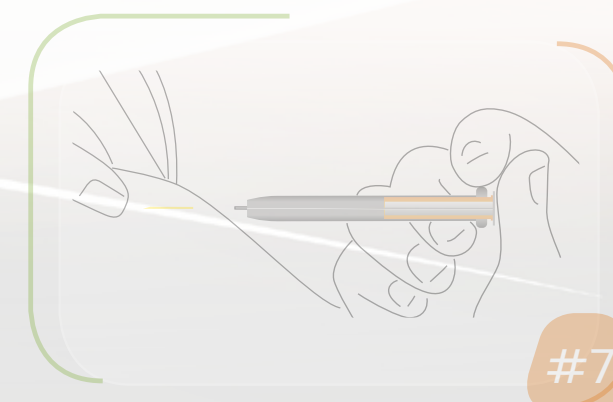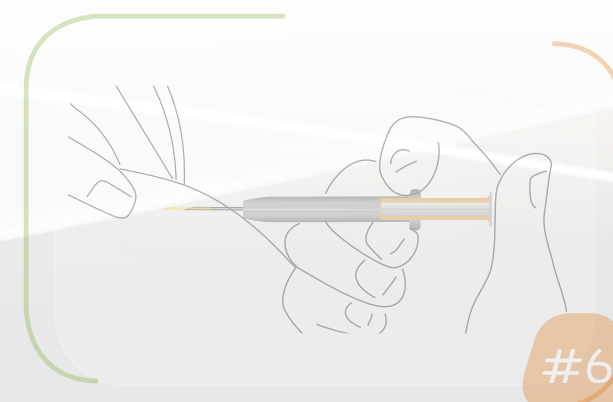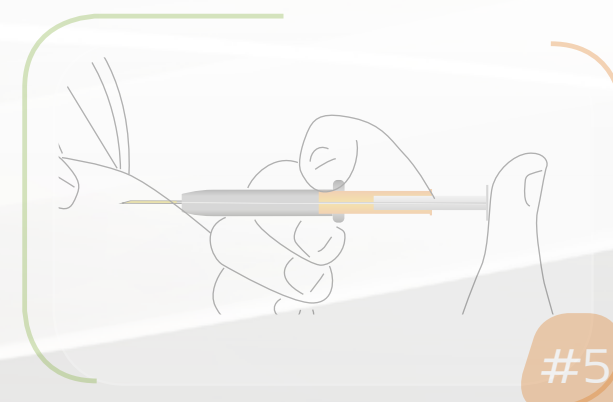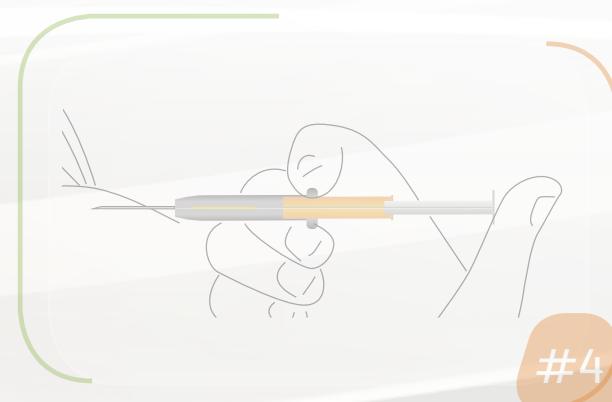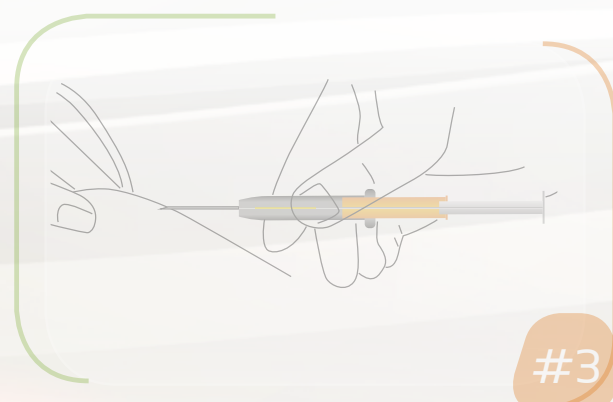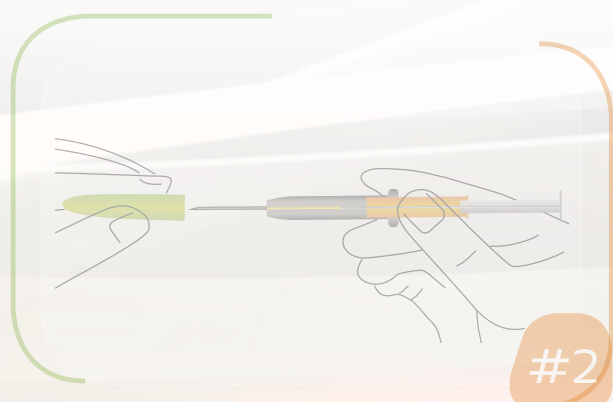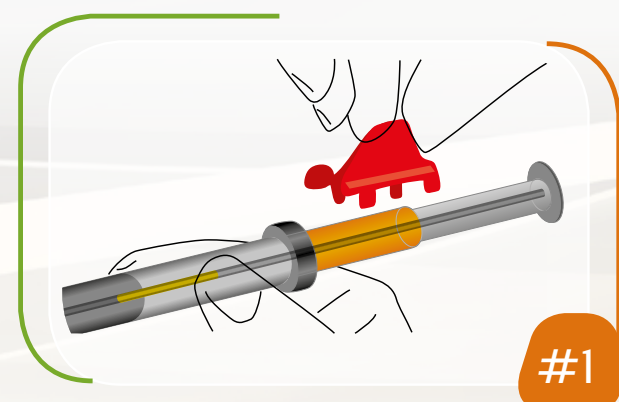

Ref










ChPL

Instrukcja podania

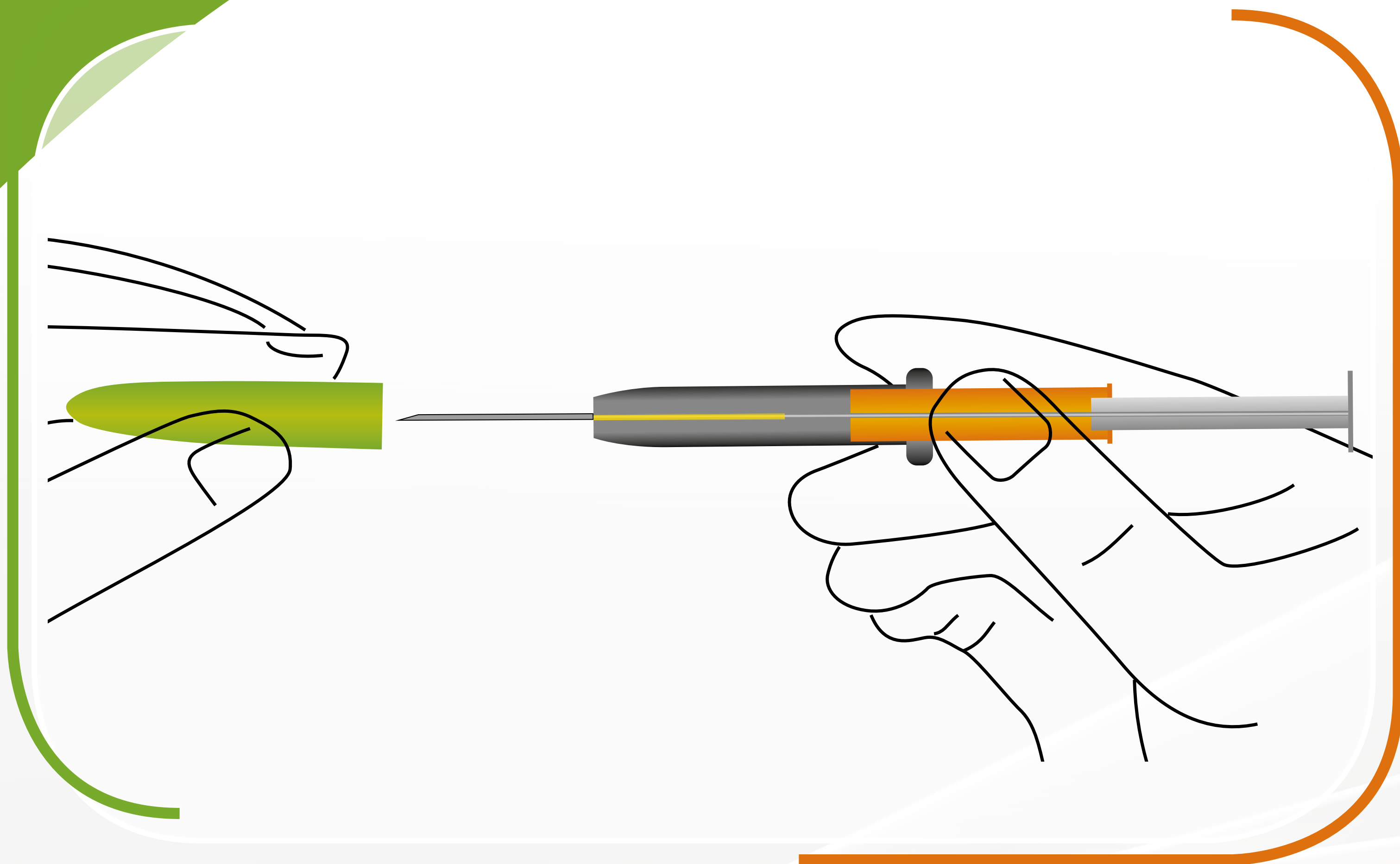

#2


- Chwycić aplikator za cylinder strzykawki i zdjąć osłonę zabezpieczającą.
- Ostrożnie wyjąć osłonę zabezpieczającą.

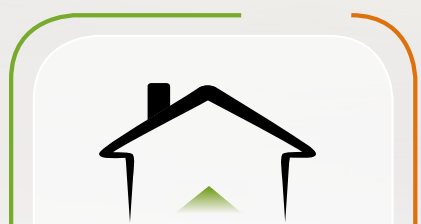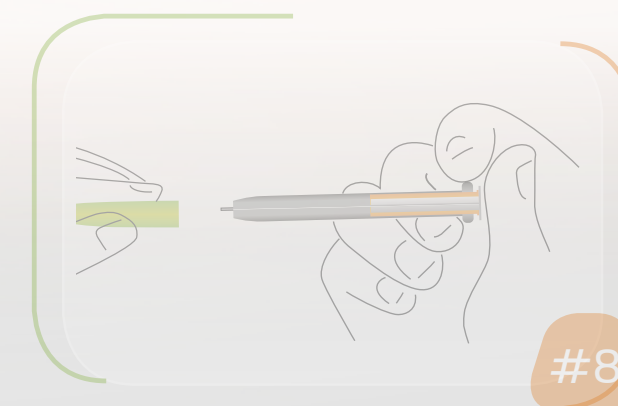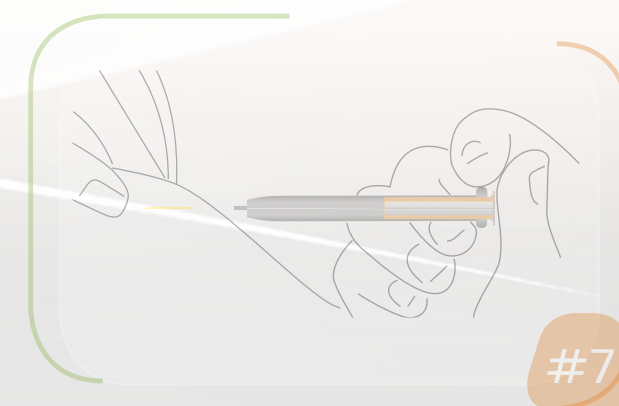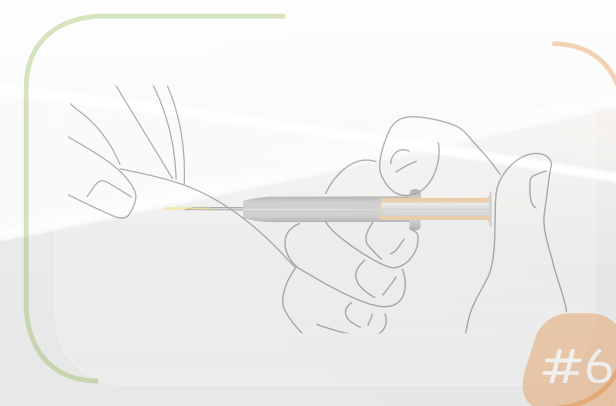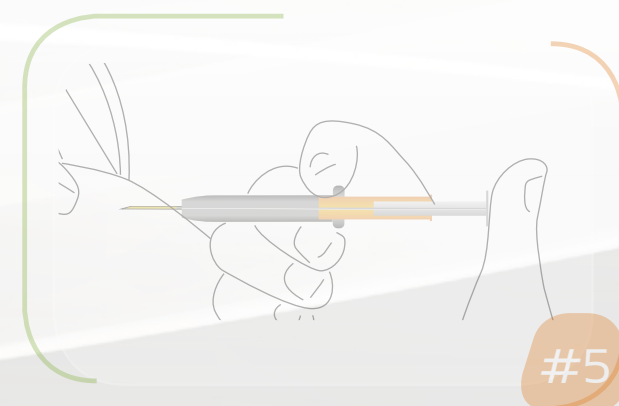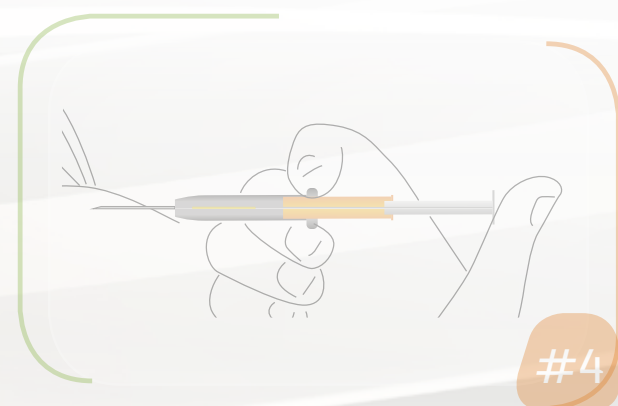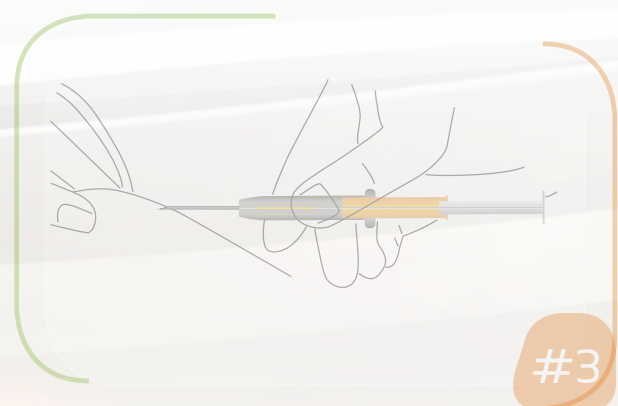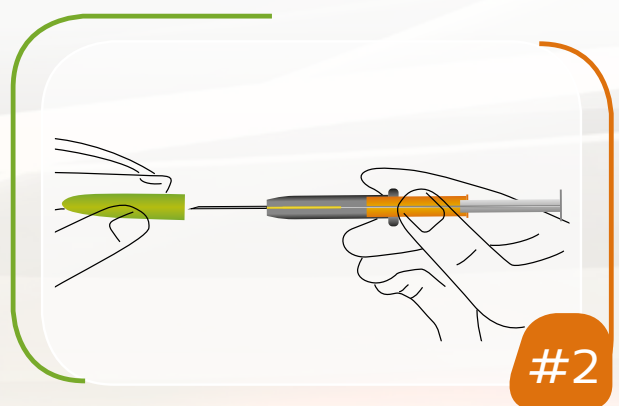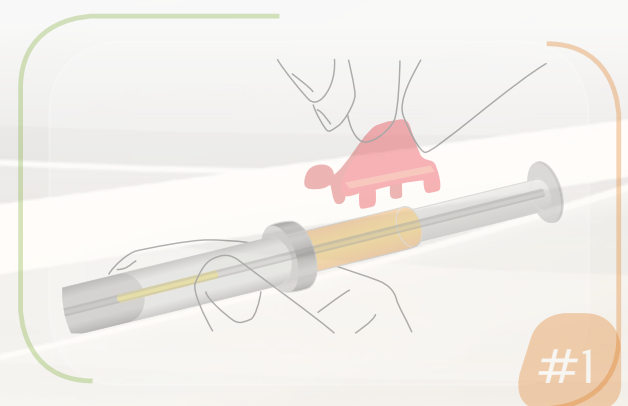

Ref








ChPL

Instrukcja podania

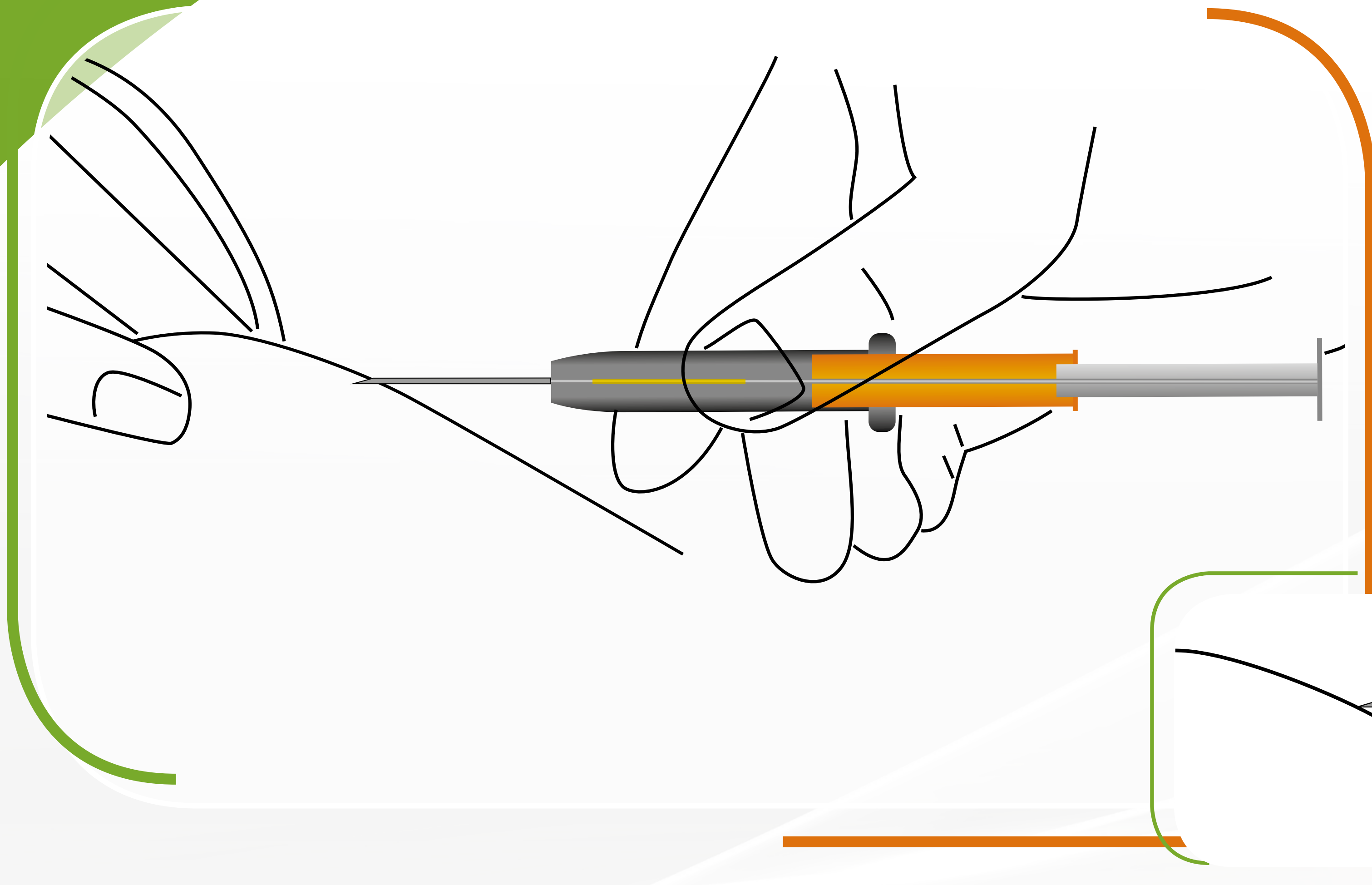

#3


- Unieść fałd skóry pacjenta i wprowadzić igłę pod kątem (prawie równoległe do powierzchni skóry).
- Wprowadzić igłę podskórnie (nie do mięśnia lub jamy brzusznej) w przedniej ścianie brzucha, poniżej linii pępka, do momentu aż cylinder strzykawki dotknie skóry pacjenta.
- **W trakcie całego wstrzyknięcia należy zachować kontakt ze skórą!**

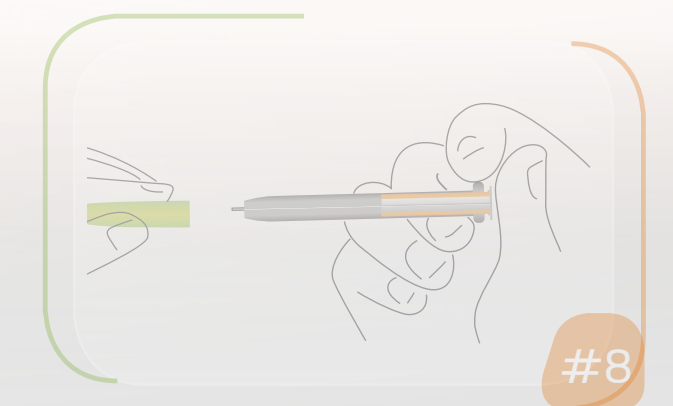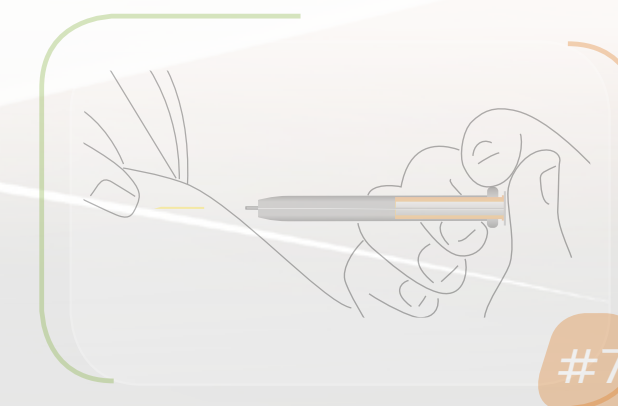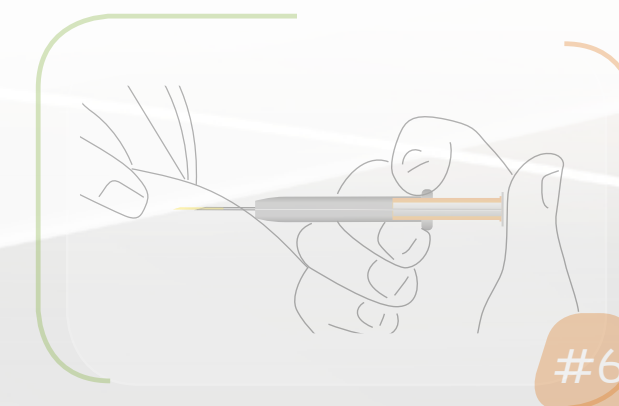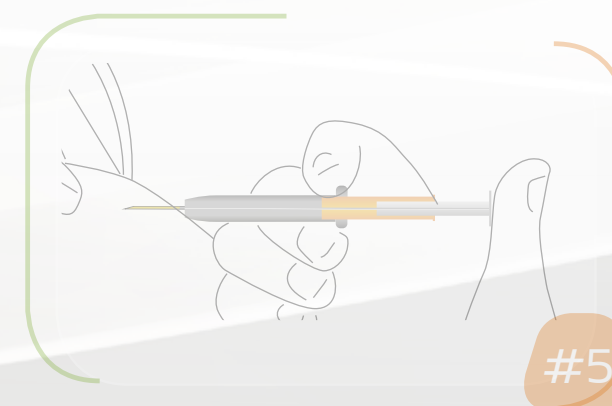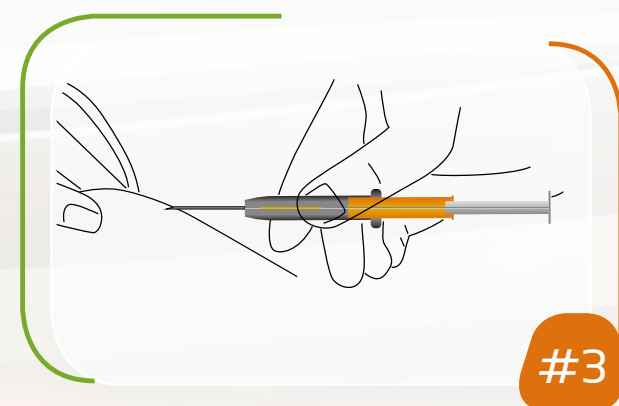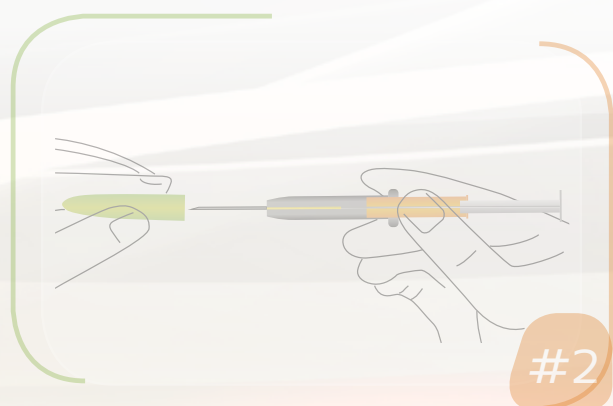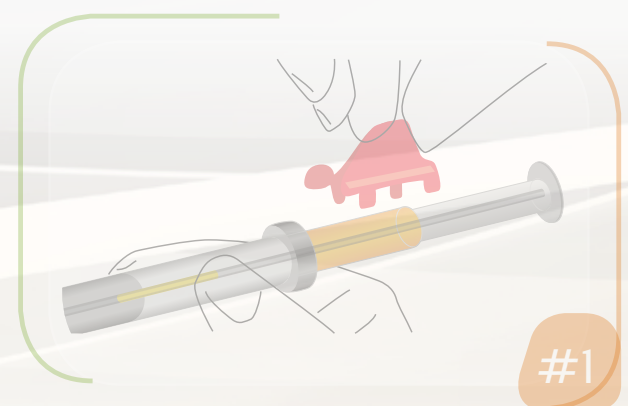

Ref









ChPL

Instrukcja podania

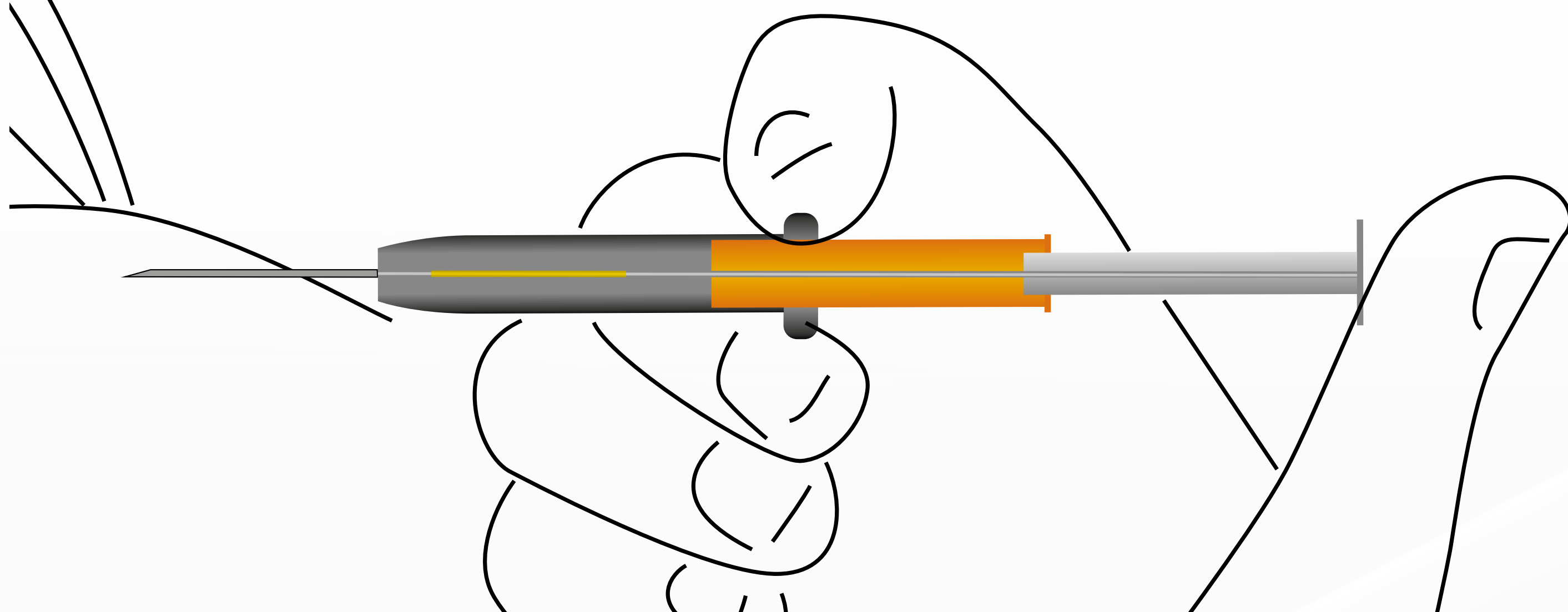

#4


- Nacisnąć tłok strzykawki.
- Implant zostaje przetransportowany do końcówki igły.
- Nie wyciągać strzykawki pod żadnym pozorem.
- W czasie aplikacji implantu cylinder strzykawki musi dotykać skóry pacjenta!

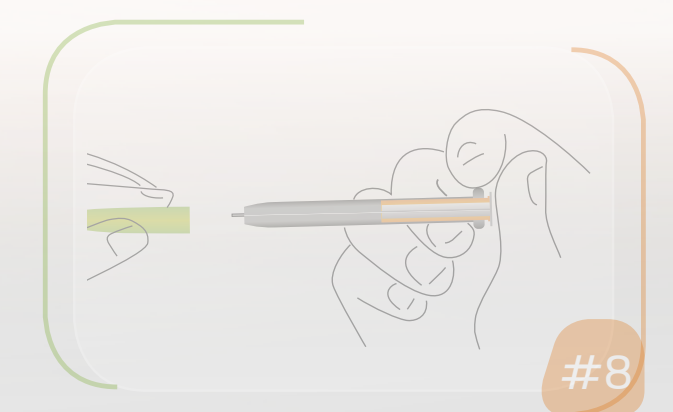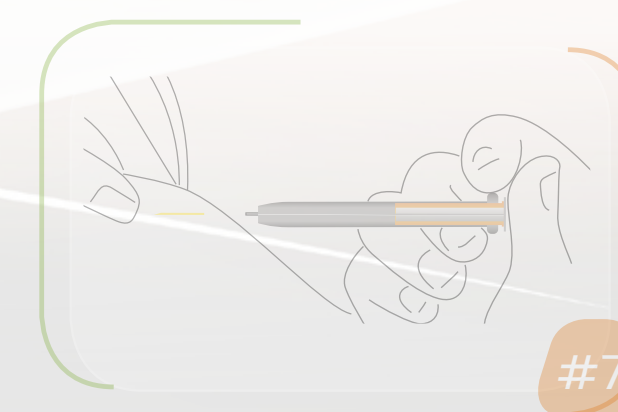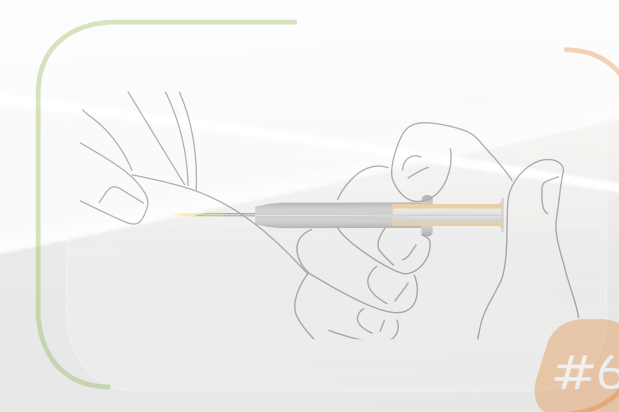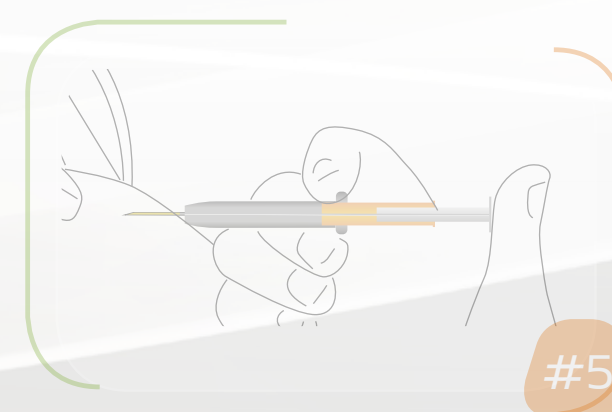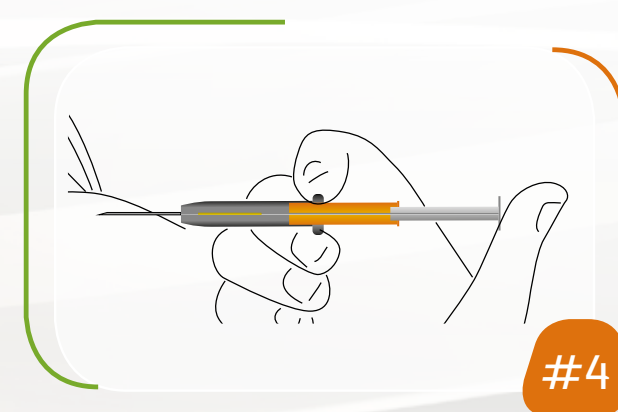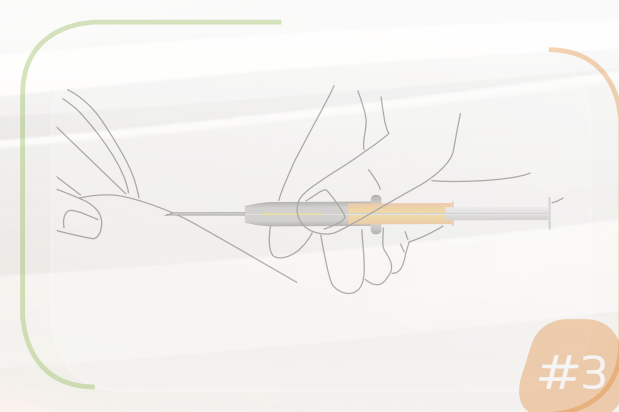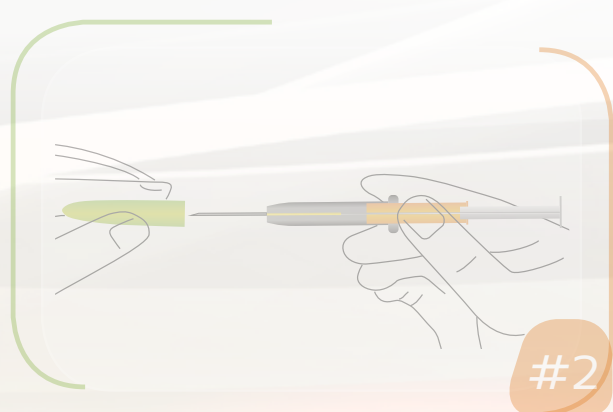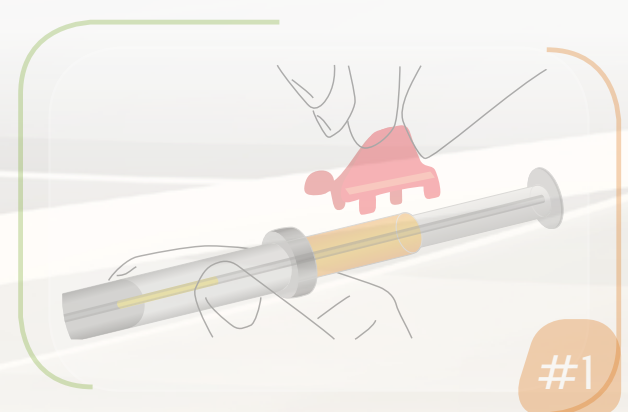

Ref


ChPL

Instrukcja podania

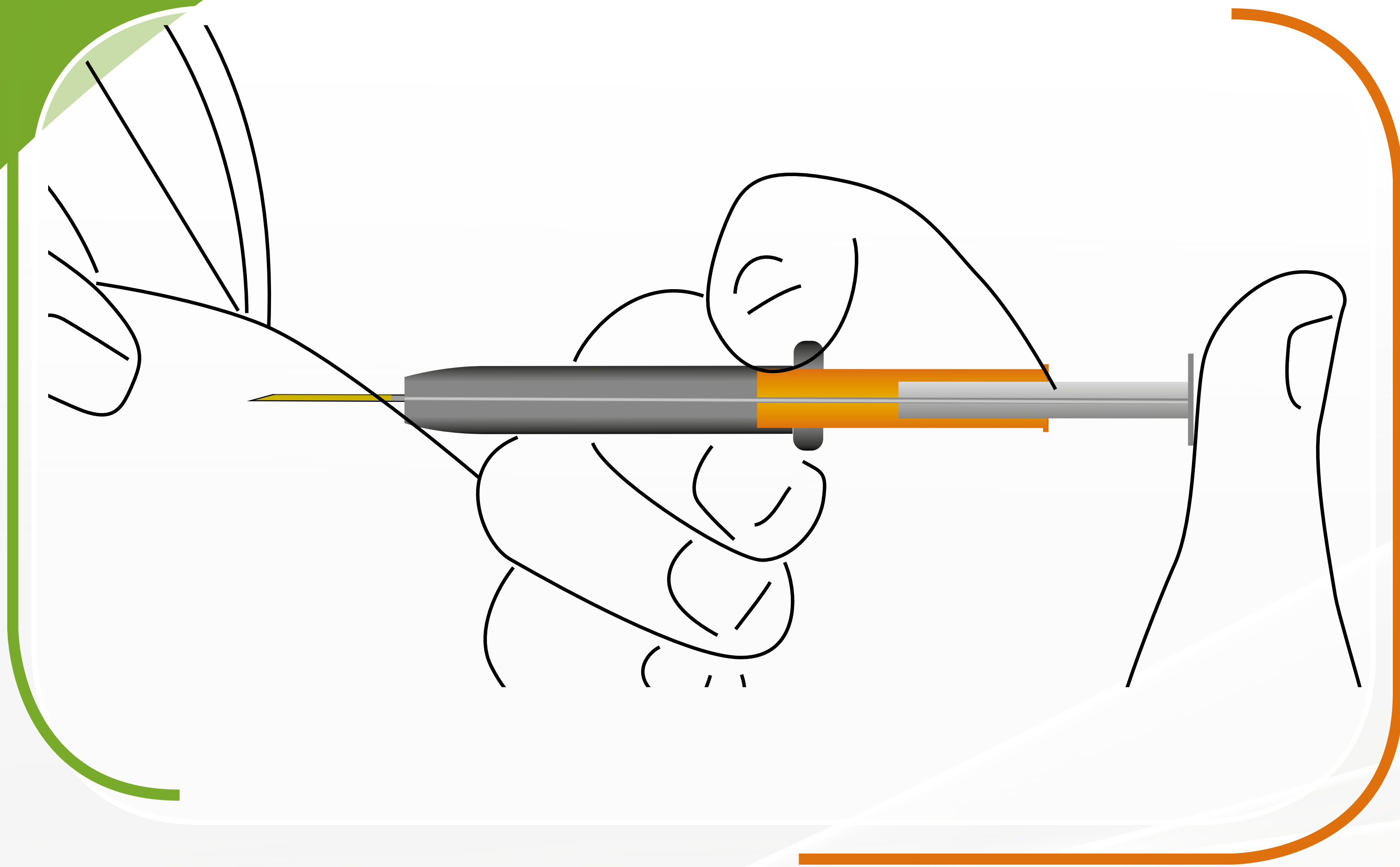


#5


- Po zatrzymaniu tłoka mechanizm cofania igły uruchomi się automatycznie.

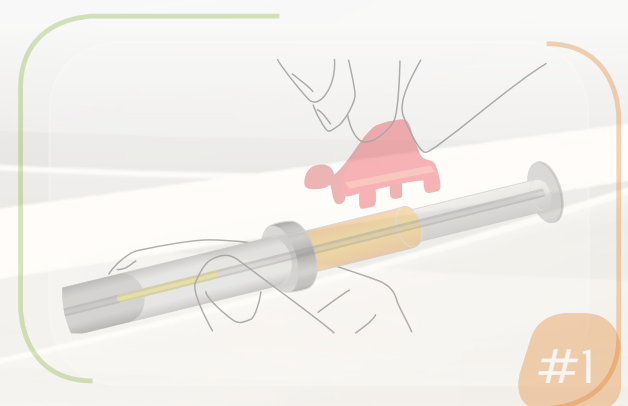


#1

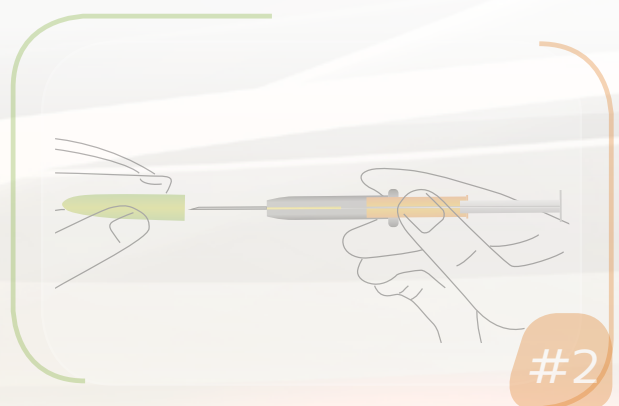


#2

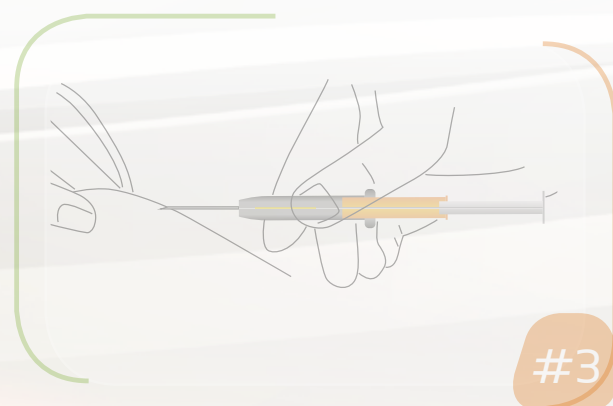


#3

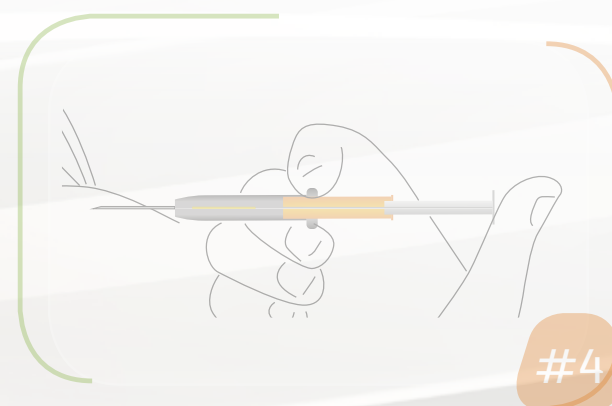


#4

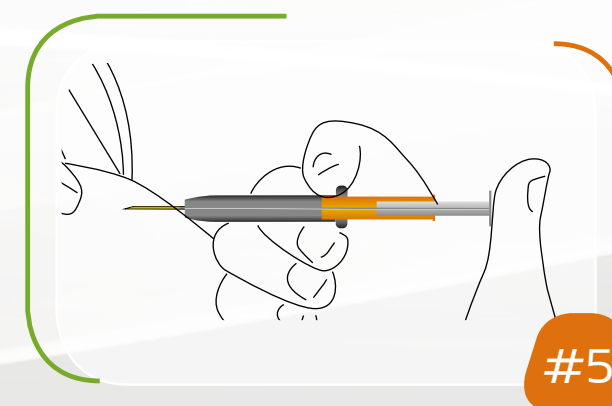


#5

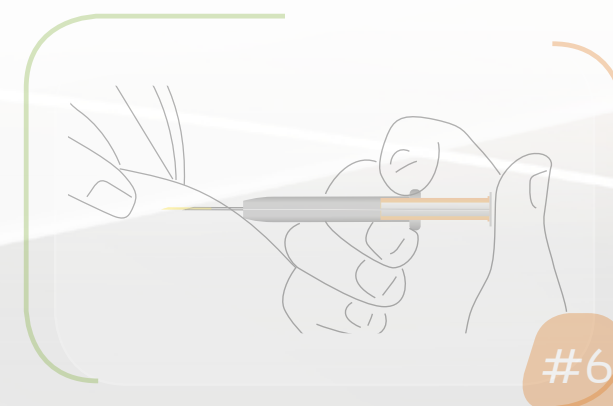

#6

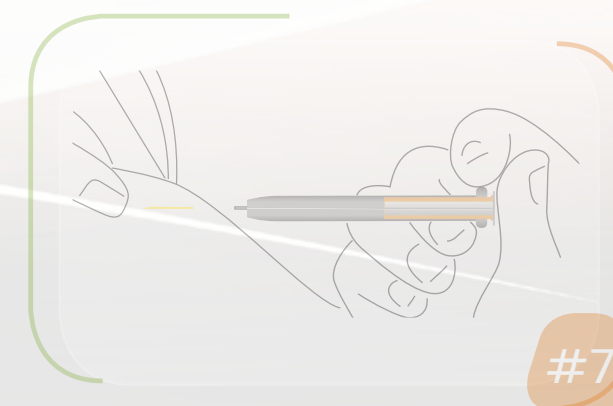

#7

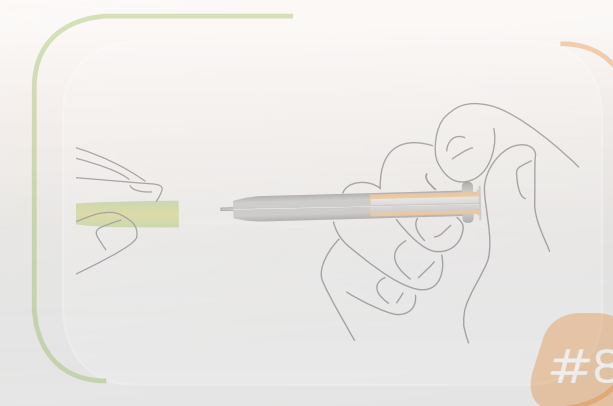


#8



Ref









ChPL

Instrukcja podania

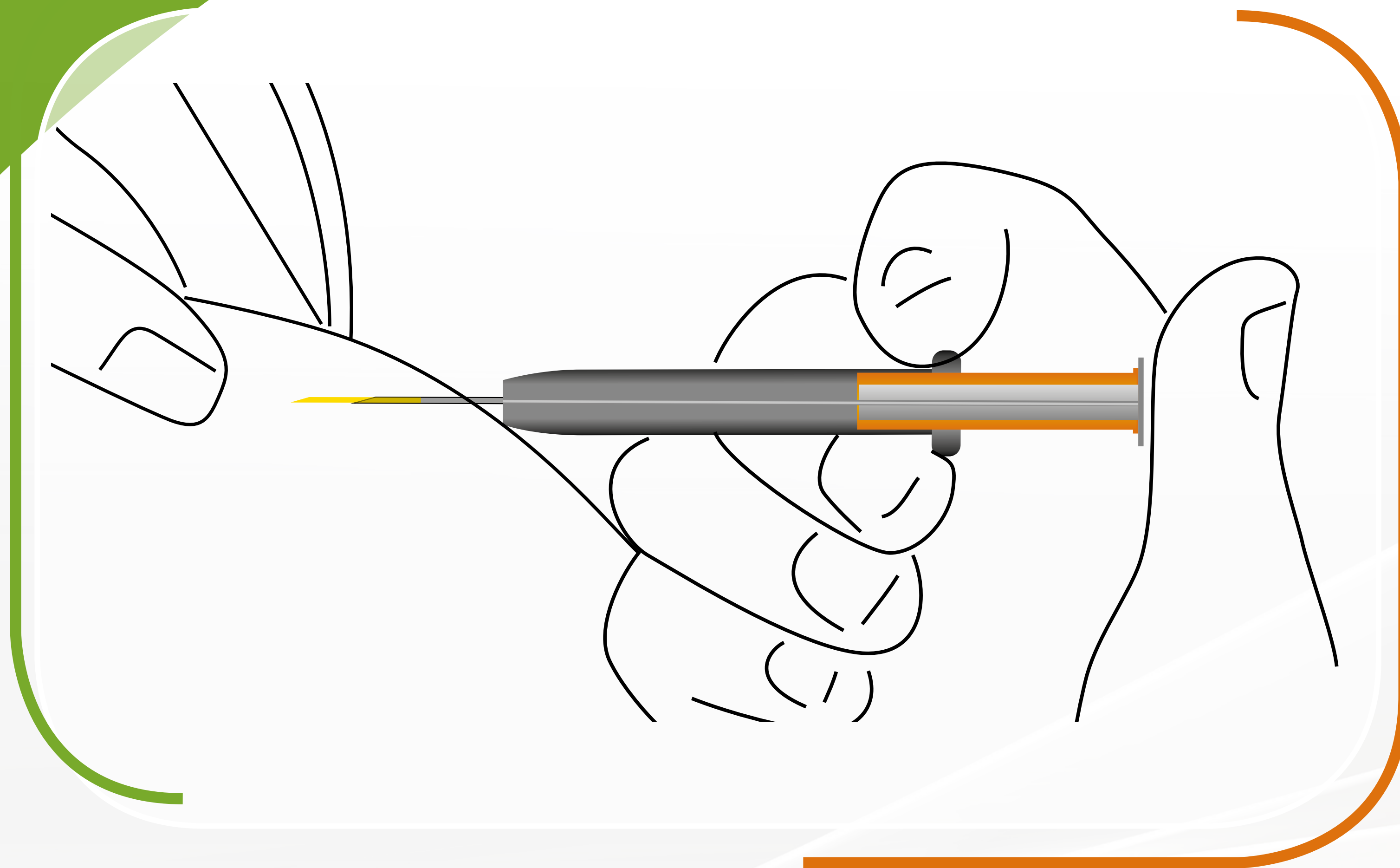

#6


- Igła zostaje cofnięta z tkanki do cylindra strzykawki.
- **Cylinder strzykawki musi pozostać w ciągłym kontakcie ze skórą pacjenta.** Zwykle ruch tłoka do przodu i wycofanie igły następują w jednym płynnym ruchu.

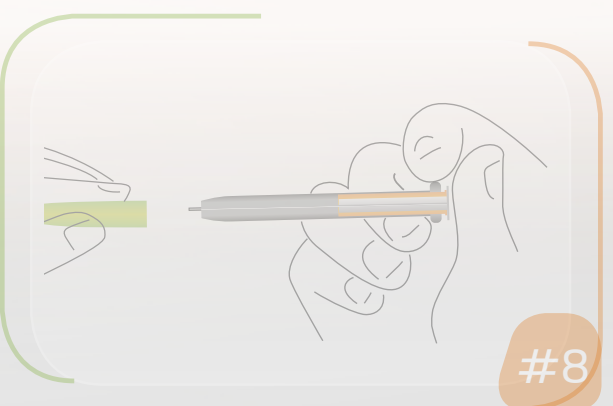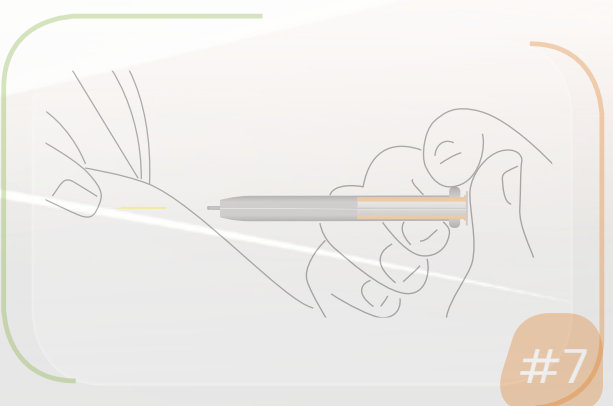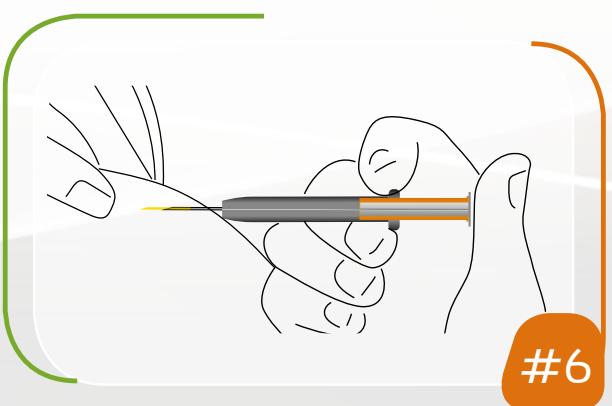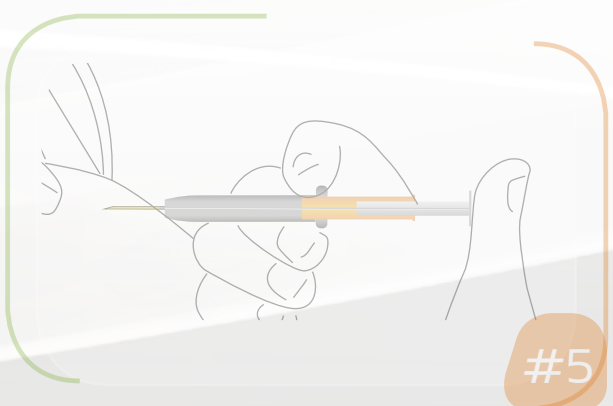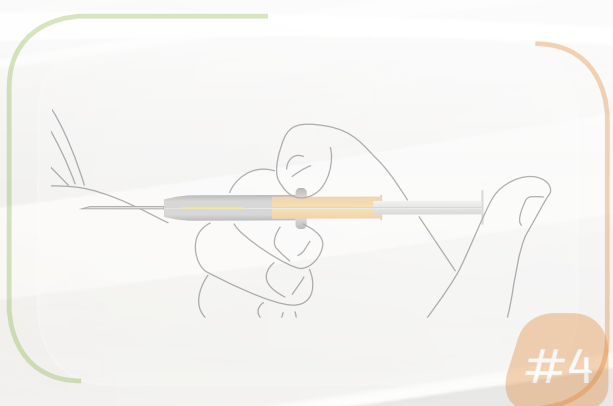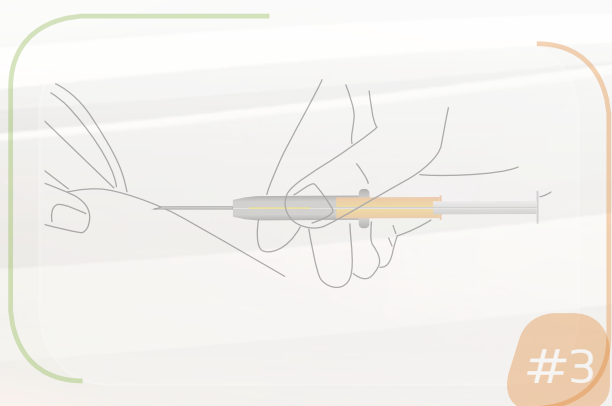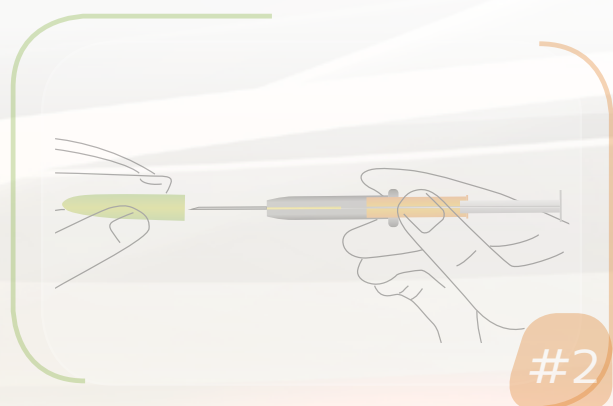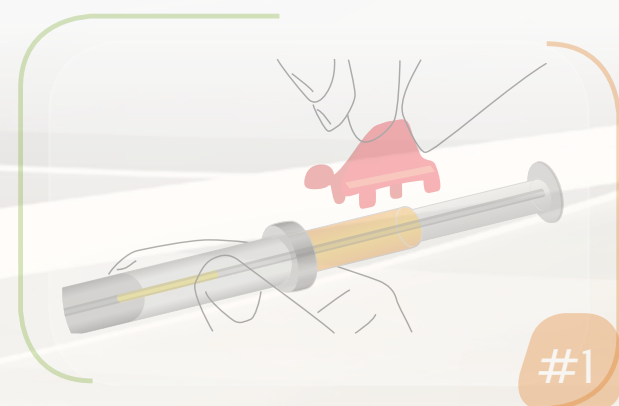

Ref









ChPL

Instrukcja podania

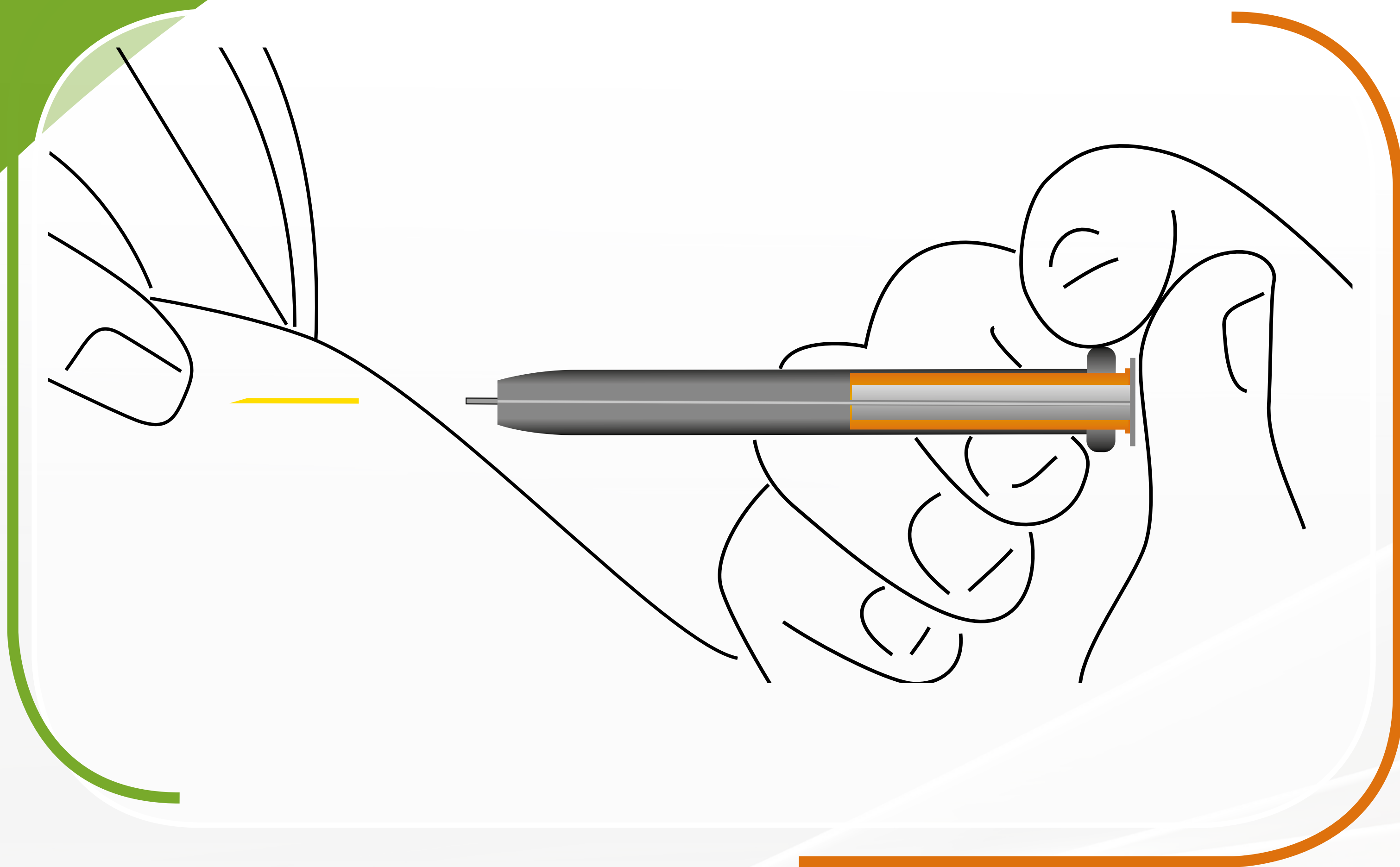

#7


- Proces aplikacji został zakończony. Igła została całkowicie cofnięta do cylindra strzykawki.
- Trzpień supernatantu chroni przed urazem przy końcówce igły.

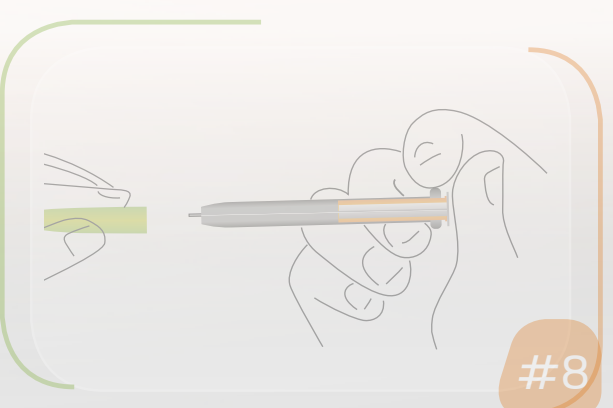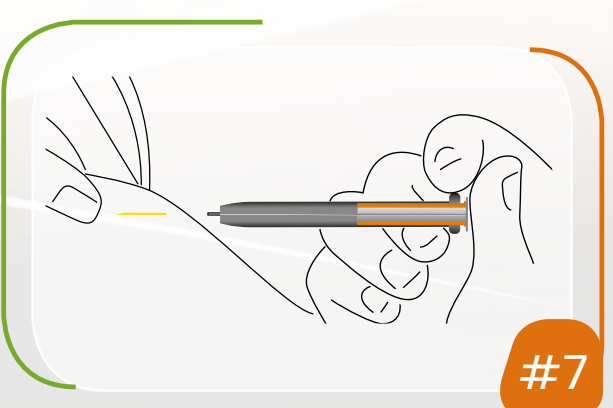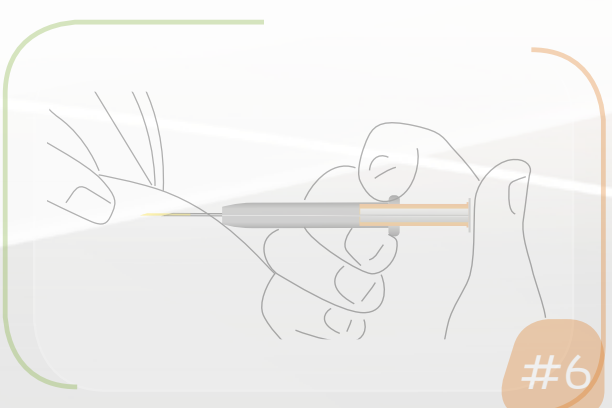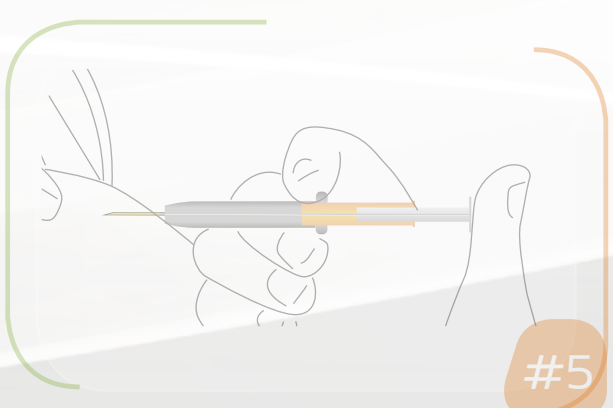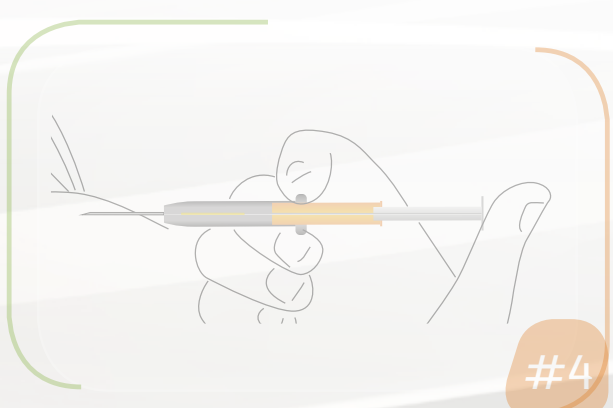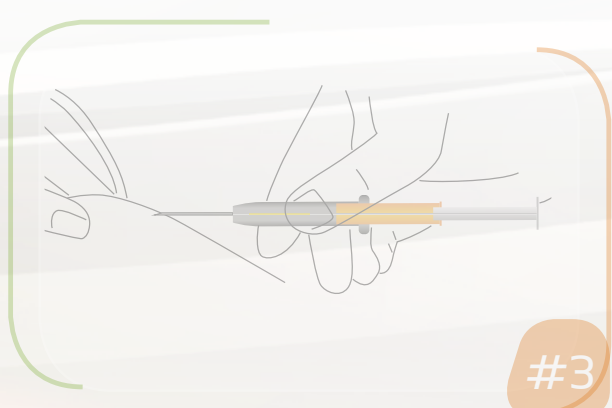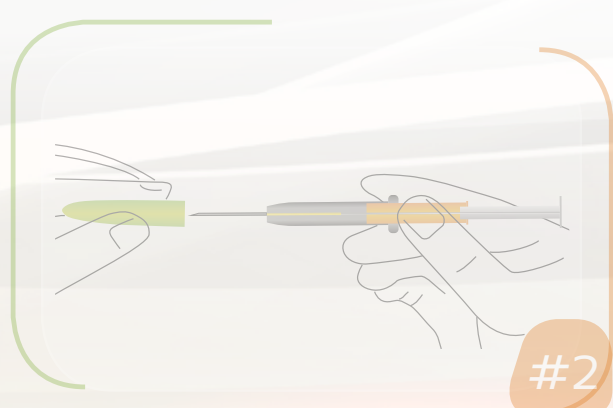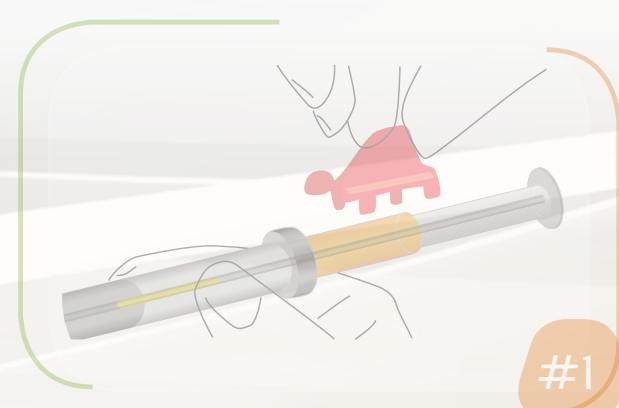

Ref








ChPL

Instrukcja podania

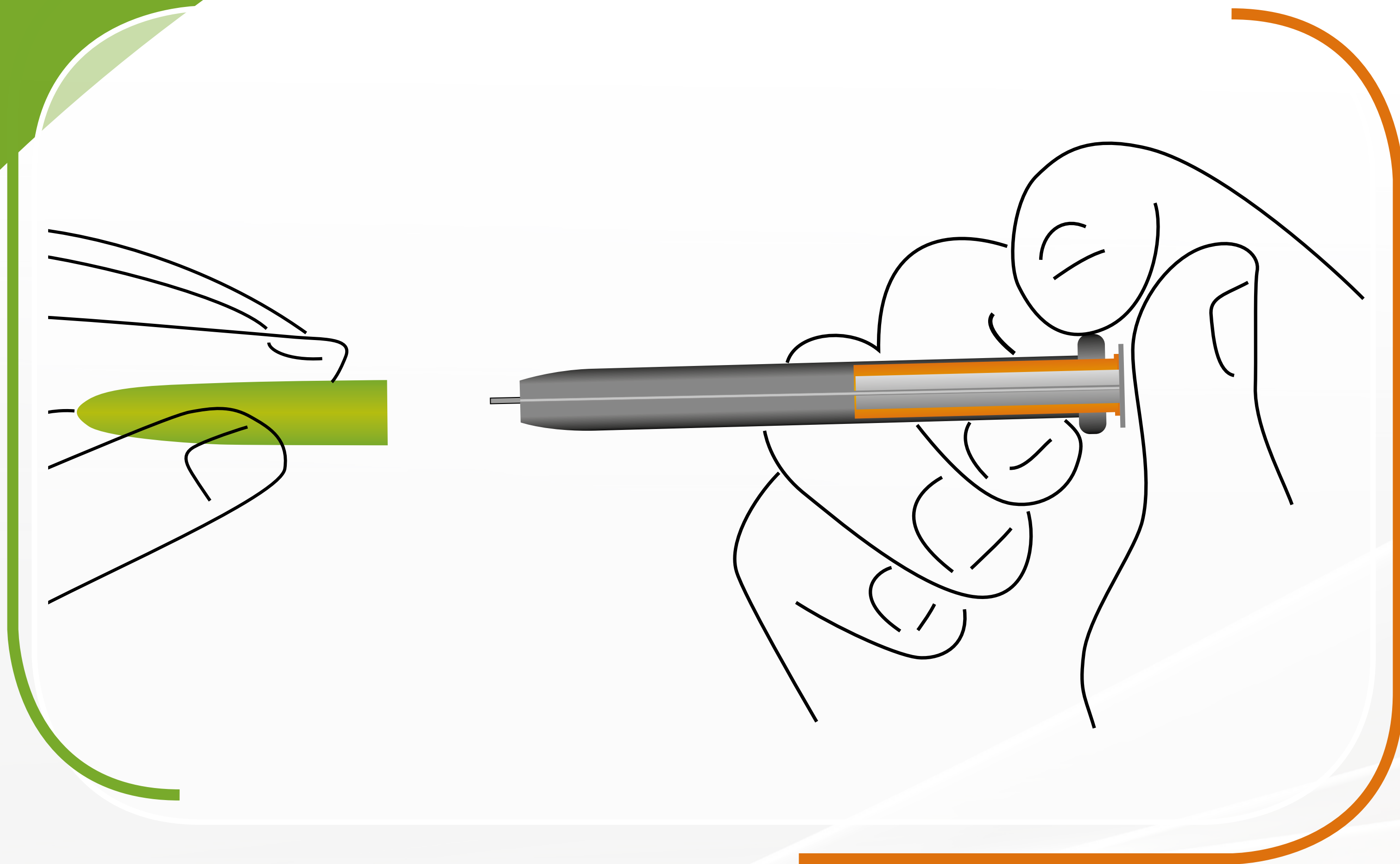

#8

- Nałożyć ponownie osłonę zabezpieczającą.
- Wyrzucić strzykawkę w dostarczonym pojemniku.

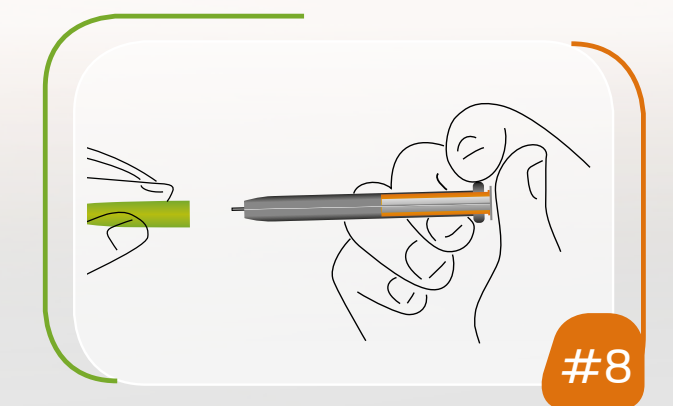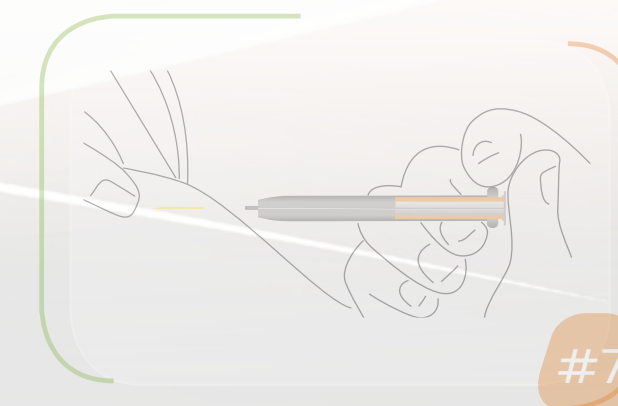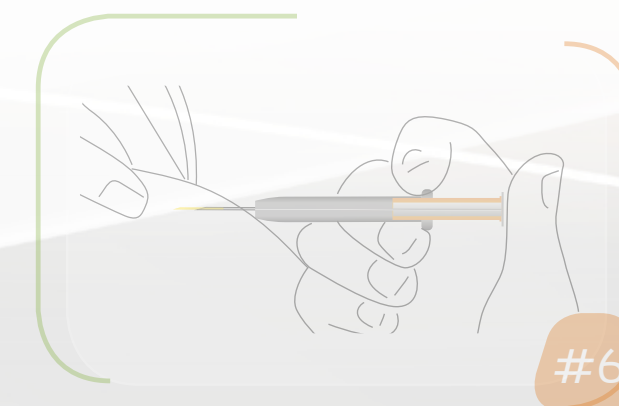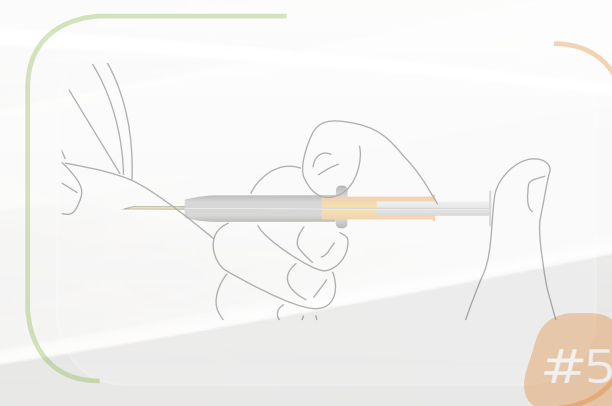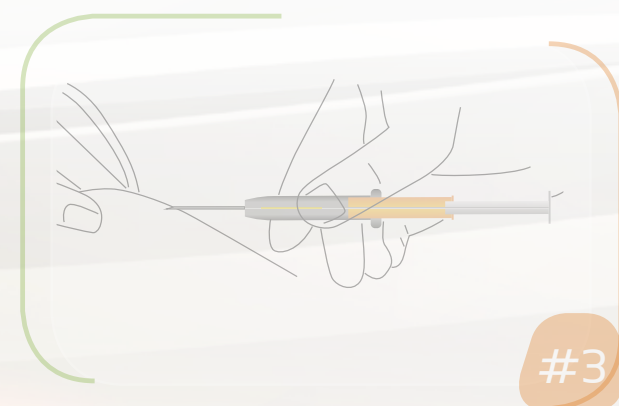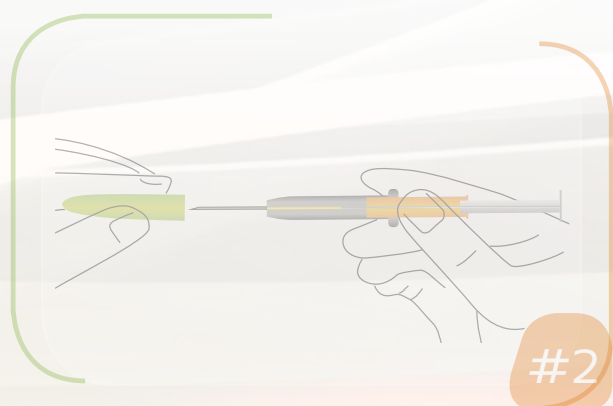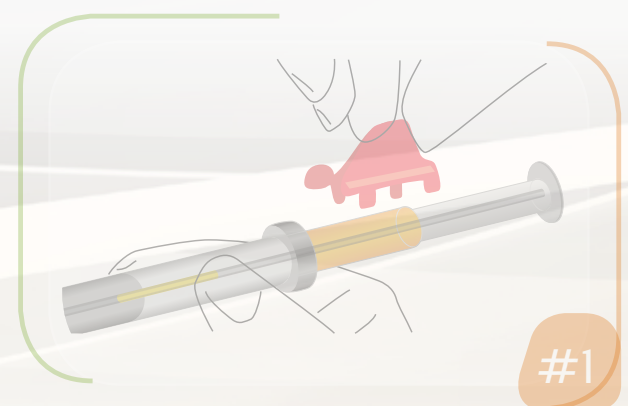

Ref

ChPL